



Continuous Glucose Monitoring System

מערכת לניהול נתונים (DMS) מדריך למשתמש



Eversense ולוגו Eversense הם סימנים מסחריים של Senseonics, Incorporated. מותגים אחרים והמוצרים שלהם הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של בעליהם החוקיים.

Eversense DMS אינה מכילה תכנות זדוניות או וירוסים אשר עלולים להזיק למחשב שלך. מומלץ השימוש בתכנת 'חומת אש' מתאימה ותכנת אנטי-וירוס על גבי המחשב שלך על מנת למנוע חדירה של תכנות זדוניות ושל וירוסים.

על מנת לקרוא את מדיניות הפרטיות של Eversense, בקר באתר global.eversenseddiabetes.com.

תוכן העניינים

33	דוח סוכר יומי	4	רשימת מונחים
35	דוח התפלגות הסוכר	6	1. מבוא
37	דוח יומן משדר	6	השימוש המיועד
40	4. Settings (הגדרות)	6	הסכם רישיון עבור משתמש קצה ומדיניות פרטיות
40	סוכר	6	עזרה ותמיכה
42	דוח סיכום	7	2. תחילת השימוש
44	5. Transmitter (משדר)	8	צור חשבון חדש
44	העלה נתוני מכשיר	9	היכנס אל המערכת
	6. Data Share (שיתוף נתונים)	10	שכחת את הססמה שלך
52	DMS Pro	11	הפרופיל שלך ותפריט הגלישה
52	הזמנה של המרפאה שלך	12	פרופיל
53	הזמנה מן המרפאה שלך	14	תפריט גלישה
53	הסרה של המרפאה שלך	16	קביעת טווח תאריכים
	7. Help (עזרה)	17	תמונת מצב Eversense DMS עם AGP
54	אודות	22	3. Reports (דוחות)
54	צרו אתנו קשר	24	זמן בתוך היעד
55	נטרל את החשבון שלי	25	זמן בתוך הטווח
55	שחרר הערות	27	דוח נטיית השינוי של הסוכר
		29	דוח מגמת הסוכר
		31	דוח היסטוריית הסוכר

רשימת מונחים

EULA הסכם רישיון עבור משתמש קצה.

אפליקציית Eversense תוכנה שמותקנת במכשיר נייד ומשמשת להצגת נתוני סוכר CGM הנשלחים מהמסדר החכם.

אפליקציית הלקוח של Eversense אפליקציית מחשב המאפשרת למשתמשי Eversense להעלות את הנתונים הקיימים על גבי המסדר החכם שלהם אל המערכת לניהול נתונים על ידי שימוש בכבל USB.

המערכת לניהול הנתונים של Eversense (DMS) אפליקציה מבוססת אינטרנט התואמת לאפליקציית Eversense שבה נתוני הסוכר שלך מאוחסנים וניתנים לצפייה.

נוזל בין-תאי (ISF) הנוזל הנמצא בין תאי הגוף. ה-CGM Eversense מודד את רמת הסוכר מנוזל בין-תאי, בניגוד לרמת הסוכר בדם המושגת באמצעות בדיקת דם מהאצבע.

סנכרון אוטומטי כאשר תכונה זו מופעלת באפליקציית Eversense עבור המכשיר הנייד, נתוני הסוכר וההגדרות שלך יסונכרנו עם ה-Eversense DMS בכל שעתיים.

סוכר בדם ערך הסוכר שהושג מבדיקת סוכר באצבע.

מד סוכר בדם מכשיר הזמין באופן מסחרי המשמש למדידת רמת הסוכר על ידי שימוש בדגימת דם מהאצבע.

כיול קריאת רמת סוכר בדם מהאצבע מוזנת אל תוך אפליקציית Eversense על מנת לבדוק את דיוק המערכת. עם מערכת ה-Eversense, ישנם שני שלבים: שלב האתחול שבמהלכו יש לבצע 4 דגימות דם מהאצבע, ושלב הכיול היומי, שבמהלכו נדרשת דגימת דם מהאצבע פעם או פעמיים ביום.

CGM ניטור סוכר רציף. ניטור רציף של רמות הסוכר מהנוזל הבין-תאי מדי כמה דקות.

התוויית נגד מצבים או נסיבות בהם אדם אינו יכול להשתמש במכשיר.

מ"ג/ד"ל מיליגרמים לדציליטר, יחידת מידה המראה ריכוז חומר מסוים בכמות נוזלים ספציפית. בחלק מן המדינות, כולל בארצות הברית, תוצאות בדיקות הסוכר מדווחות ב-מ"ג/ד"ל, דבר המראה את רמת הסוכר בדם כאשר נעשה שימוש במד סוכר בדם, או את רמת הסוכר בנוזל בין-תאי כאשר נעשה שימוש בכמה מערכות CGM, כגון מערכת ה-Eversense CGM.

ממו"ל/ל אלפיות מול לליטר, יחידת מידה המראה ריכוז חומר מסוים בכמות נוזלים ספציפית ממו"ל/ל - מילימולים לליטר, טר, יחידת מידה המראה ריכוז חומר מסוים בכמות נוזלים ספציפית. בחלק מן המדינות, תוצאות בדיקות הסוכר מדווחות ב-ממו"ל/ל, דבר המראה את רמת הסוכר בדם כאשר נעשה שימוש במד סוכר בדם, או את רמת הסוכר בנוזל בין-תאי כאשר נעשה שימוש בכמה מערכות CGM, כגון מערכת ה-Eversense CGM.

סוכר חיישן ערך הסוכר שהושג מחיישן Eversense.

חיישן התקן המיוחד מתחת לעור עבור מדידה רציפה של רמות הסוכר בנוזל הבין-תאי.

משדר חכם מכשיר לשימוש רב-פעמי שנישא באופן חיצוני מעל החיישן המיוחד, מפעיל את החיישן ושולח את נתוני הסוכר למכשיר נייד לתצוגה באפליקציית Eversense.

1. מבוא

השימוש המיועד

המערכת לניהול נתונים של Eversense (DMS) מיועדת לשימוש כאביזר למוצרי Eversense CGM נתונים. זוהי אפליקציה מבוססת אינטרנט שניתנת לשימוש על מנת לראות, לנתח ולאחסן נתוני סוכר ממערכת ה-Eversense CGM שלך.

עבור רשימת מכשירים מתאימים, אנא בקרו באתר <https://global.eversenseddiabetes.com/compatibility>.

חשוב: המערכת לניהול הנתונים של EVERSENSE איננה מספקת עצות רפואיות. אין לקבל החלטות טיפול מבלי להתייעץ עם הצוות הרפואי שלך.

הסכם רישיון עבור משתמש קצה ומדיניות פרטיות

השימוש ב-Eversense DMS כפוף לתנאים ולהתניות של הסכם הרישיון למשתמש קצה העדכני ביותר של אפליקציית Eversense ולמדיניות הפרטיות של אפליקציית Eversense. מסמכים אלו מעודכנים מעת לעת ומוצגים באתר global.eversenseddiabetes.com.

עזרה ותמיכה

אם אינך מבין משהו במדריך למשתמש זה של DMS, צור קשר במספר הטלפון (844-736-7348) 844-SENSE4U. אם אתה נמצא מחוץ לארה"ב, צור קשר עם המפיץ המקומי או בקר באתר global.eversenseddiabetes.com על מנת לראות מיהו המפיץ המקומי באזורך.

2. תחילת השימוש

ה-Eversense DMS היא אפליקציה מבוססת דפדפן אינטרנט (אפליקציית אינטרנט) המאפשרת לך להעלות באופן אוטומטי את הנתונים מאפליקציית Eversense הניידת שלך מן המכשיר החכם התואם אל האינטרנט עבור אחסון ממושך וסקירה.

תכנת המחשב מאפשרת למחשב שלך לתקשר ישירות עם אפליקציית האינטרנט. אתה יכול גם להעלות את הנתונים שלך ישירות מן המשדר החכם אל חשבון ה-Eversense DMS שלך באמצעות חיבור כבל על ידי הורדה והתקנה של תכנת המחשב ללקוח Eversense היישר אל המחשב האישי שלך.

אם כבר יצרת חשבון באפליקציית Eversense הניידת, אינך צריך ליצור חשבון חדש.

1. עבור אל global.eversensedms.com

The screenshot shows the 'Create New Account' page on the Eversense website. It features the Eversense logo at the top, followed by a language selector set to 'English (UK)'. Below this is a 'Create New Account' section with four input fields: 'First Name', 'Last Name', 'Email', and 'Create a password'. Each field has a red asterisk indicating it is mandatory. There are also example values provided for each field: 'First Name', 'Last Name', 'sample@email.com', and 'Eg. abc@1A'. A 'Confirm your password' field is also present with the same example value. A blue 'Next' button is located at the bottom right of the form. At the very bottom, there is a link to 'Sign In' for users who already have an account and a copyright notice for 2022 Senseonics.

2. הקש על "Sign Up" (הירשם)

3. הזן את המידע הנדרש

4. הקש על "Submit" (הגש)

צור חשבון חדש

לפני השימוש ב-Eversense DMS, יהיה עליך להירשם כמשתמש.

The screenshot shows the 'Sign Up' page on the Eversense website. It features the Eversense logo at the top, followed by a language selector set to 'English (UK)'. Below this is a 'Need an Account?' section with a red box highlighting the 'Sign Up' link. There are two input fields: 'Email' and 'Password', both with red asterisks indicating they are mandatory. A blue 'Sign In' button is located below the password field. At the bottom, there are links for 'Forgot your Password?', 'Problem logging in? Contact Us', and 'To sign in to Eversense DMS Pro click here'.

הערה: אתה תתבקש לקבוע שאלה סודית לבטיחות נוספת לאחר שתיכנס אל המערכת בפעם הראשונה. ניתן להשתמש כעת בכתובת הדוא"ל והססמה שהזנת כנתוני כניסה אל חשבון ה-Eversense DMS ואל כל מוצרי Eversense האחרים.

היכנס אל המערכת

בכל פעם בה תרצה להשתמש ב-Eversense DMS אתה תצטרך להיכנס אל המערכת.

1. עבור אל global.eversensedms.com

2. בעמוד הכניסה אל המערכת, הזן את כתובת הדוא"ל ואת הססמה

3. הקש על "Sign In" (היכנס אל המערכת)

English (UK) ▾

Need an Account ? [Sign Up](#)

Email *

sample@email.com

Password *

Password

* Mandatory field

Sign In

[Forgot your Password?](#)

Problem logging in? [Contact Us](#)


To sign in to Eversense DMS Pro click [here](#)

חשוב: אם יהיו לך יותר משלושה ניסיונות כושלים להיכנס אל המערכת, חשבון ה-Eversense DMS ינעל למשך 30 דקות.


הערה: אם אינך פעיל באתר DMS לפרק זמן של עד שעה אחת, אתה תקבל חלון מוקפץ אשר יורה לך לבחור "Continue" (המשך) אם תרצה להישאר בתוך המערכת.

שכחת את הססמה שלך

אם שכחת את הססמה שלך עבור הכניסה אל המערכת, אתה יכול ליצור בקלות ססמה חדשה.

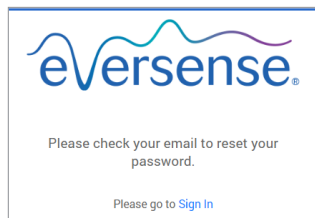


מסר יוצג על מנת ליידע אותך שהודעת דוא"ל נשלחה אליך עם הוראות לאיפוס הססמה שלך.

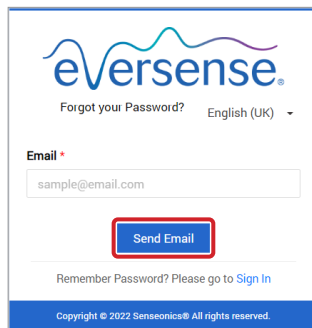


1. הקש על "Forgot your password" (שכחת את הססמה שלך) בעמוד הכניסה אל המערכת

2. הזן את כתובת הדוא"ל שלך כאשר תתבקש לעשות זאת

3. הקש על "Send Mail" (שלח הודעת דוא"ל)

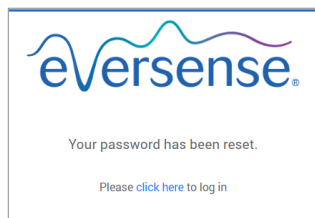

מסר יופיע, המאשר שהססמה אופסה. בחר בקישור "click here" (הקש כאן) על מנת לחזור אל עמוד הכניסה אל המערכת.

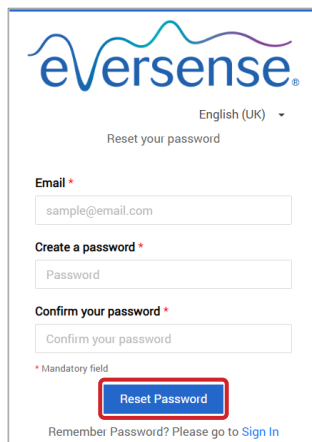

4. פתח את הודעת הדוא"ל והקש על הקישור לאתר אתה תגיע היישר אל עמוד אינטרנט שבו תיצור ותאשר ססמה חדשה.

5. הקש על "Reset Password" (אפס ססמה)

הפרופיל שלך ותפריט הגלישה

לאחר כניסה מוצלחת אל המערכת, לוח מחוונים עם AGP יוצג.

- בפינה הימנית העליונה של העמוד אתה יכול להיכנס אל מידע ה-**Profile** (פרופיל) שלך.

- בפינה השמאלית העליונה תוכל לראות **Navigation Menu** (תפריט גלישה).

The screenshot shows the Eversense CGM dashboard. A red box on the left highlights the **Navigation Menu**, which includes links to Dashboard, Reports, Settings, Transmitter, Data Share, and Help. A red box on the top right highlights the user profile area, showing the email address **jeangarc57@gmail.com**. Red arrows point from the text above to these two areas.

Dashboard

Eversense Wear Time: 20.56 %

Period: Jan 13 2022 - Apr 12 2022

System Information		Glucose Settings	
Transmitter: 35248	Target	Low: 79 mg/dL	High: 140 mg/dL
Sensor: 262344	Alert	Low: 70 mg/dL	High: 200 mg/dL

Time range: Last 7 Days, Last 14 Days, Last 30 Days, Last 60 Days, **Last 90 Days**, Custom Range

פרופיל

2


כאשר היא ממוקמת בפינה הימנית העליונה של תמונת המצב תכונה זו מאפשרת לך לשנות את השם או את הססמה שלך, לערוך את פרופיל המשתמש שלך או לצאת מתכנת Eversense DMS.

אם תרצה לשנות את הססמה שלך עבור הכניסה אל המערכת, אתה יכול לקבוע מחדש בקלות ססמה חדשה.


1. הקש על שם המשתמש שלך

תפריט נשלף יופיע אשר יציג את תמונת הפרופיל שלך, אתה הכניסה האחרונה שלך אל המערכת ואפשרויות לראות/לערוך את הפרופיל שלך או לצאת מן המערכת.

2. הקש על "Profile" (פרופיל) על מנת להיכנס אל הגדרות הפרופיל של המשתמש

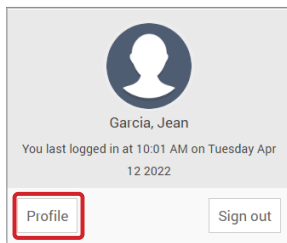

3. הקש על "Change Password" (שנה ססמה) על מנת להציג ולשנות את הססמה הנוכחית שלך.

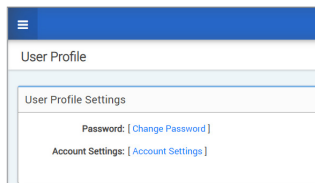

4. הזן את הססמה הנוכחית שלך

5. הזן ואשר את הססמה החדשה שלך

6. הקש על "Change Password" (שנה ססמה) על מנת לשמור את השינויים שלך

על מנת לשנות את המידע האישי עבור החשבון שלך:

1. הקש על "Account Settings" (הגדרות חשבון)

2. הזן את המידע אותו תרצה לשנות

אתה יכול לשנות את תמונת הפרופיל שלך על ידי לחיצה על לחצן **Choose File** (בחר קובץ), ובחירה של תמונה מתוך הקבצים על גבי המחשב שלך. תמונת הפרופיל תשונה עבור כל מוצרי Eversense התואמים.

The screenshot shows the 'Account Settings' page with the 'Profile Details' section. The page header includes a menu icon, 'Last Sync Date : Friday Apr 01 2022 9:44 AM', 'English (UK)', and the email 'jeangarc97@gmail.com'. The 'Profile Details' section contains the following fields:



- Profile Picture:** A circular placeholder icon with a 'Choose File' button and the text 'No file chosen'.
- First Name:** Text input field containing 'Jean'.
- Last Name:** Text input field containing 'Garcia'.
- Mobile Number:** Text input field containing '1234567891'.
- Date Of Birth:** Date picker showing '10/07/2000'.
- Gender:** Dropdown menu showing 'Female'.
- Diabetes Type:** Dropdown menu showing 'Type1'.
- Secret Question:** Dropdown menu showing 'What is the name of your first pet?'.
- Answer:** Text input field containing four asterisks '****'.
- Show Answer:** A checkbox that is currently unchecked.

3. הקש על "Save" (שמור) על מנת לשמור את השינויים שלך.


עמוד הגדרות הפרופיל של המשתמש יופיע שוב. על מנת לחזור אל תמונת המצב הקש על "Dashboard" (תמונת מצב) בפינה השמאלית העליונה על גבי לוח הגלישה.

תפריט גלישה

בפינה השמאלית העליונה של תמונת המצב עם ה-AGP נמצא תפריט הגלישה. אתה יכול לפתוח ולסגור את תפריט הגלישה על ידי לחיצה על . הקש על כל לחצן בתפריט על מנת לגלוש אל אפשרות זו.

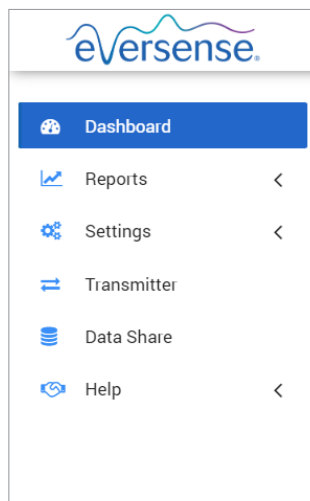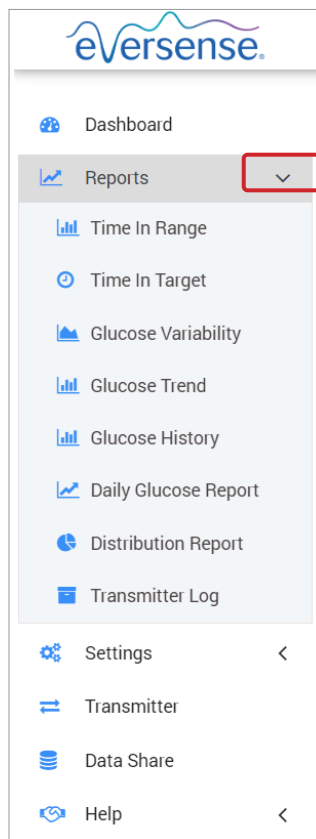

הערה: אתה יכול לבחור גם את השפה המועדפת עליך על ידי לחיצה על השפה.

אתה יכול להקיש על סמל  על מנת להרחיב את הבחירה בתפריט הגלישה.

בחירות תפריט	תכונות
Dashboard (תמונת מצב)	חזור אל תמונת מצב
Reports (דוחות)	<p>הצג, הדפס ושתף דוחות</p> <ul style="list-style-type: none"> • זמן בתוך היעד • זמן בתוך הטווח • השתנות הסוכר • מגמת הסוכר • היסטוריית סוכר • דוח סוכר יומי • דוח התפלגות • יומן משדר
Settings (הגדרות)	<p>הגדרות Eversense DMS</p> <ul style="list-style-type: none"> • סוכר • דוח סיכום
Transmitter (משדר)	הורד את אפליקציית הלקוח
Data Share (שיתוף נתונים)	קשר את חשבון ה-DMS אל ה-DMS Pro
Help (עזרה)	<ul style="list-style-type: none"> • אודות • יצירת קשר • נטרל חשבון • שחרר הערות

קביעת טווח תאריכים



בחלק העליון של לוח המחוונים, אתה תמצא את האפשרויות שלך לטווח תאריכים מוגדר מראש, וכמו כן את האפשרות לקבוע טווח תאריכים מותאם אישית עבורך. הדבר ישפיע על אילו נתונים יהיו בשימוש עבור ניתוחי נתונים והדרך בה הם מוצגים בלוח המחוונים ה-AGP ובכל הדוחות האחרים.

על מנת לשנות את הגדרות טווח התאריכים שלך:

1. אם תרצה לראות נתונים אשר לא נמצאים בתוך אחד מטווחי התאריכים המוגדרים מראש, הקש על לחצן המכונה "Custom Range" (טווח מותאם אישית) על מנת להציג לוח שנה



הדבר יציג חלון מוקפץ המאפשר לך לבחור בטווח התאריכים המותאם אישית עבורך.
הערה: נתונים זמינים דרך ה-DMS יהיו בטווח של עד שנה אחת אחורנית.

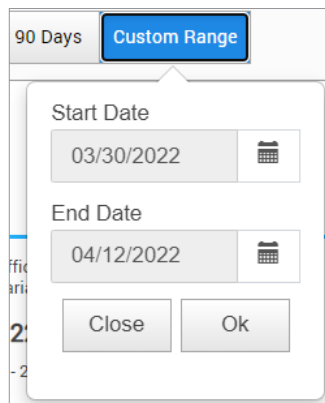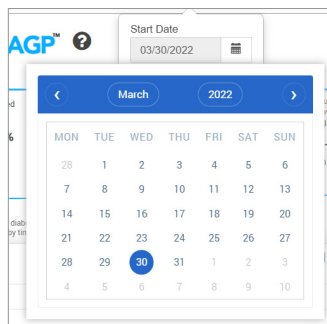

2. בחר **Start Date** (תאריך התחלה) עבור הדיווח הרצוי

3. בחר **End Date** (תאריך סיום) עבור הדיווח הרצוי

4. הקש על "Ok" (אישור) בסיום

תמונת מצב Eversense DMS עם AGP

תמונת המצב של Eversense DMS הוא עמוד ברירת המחדל אותו רואה בכל פעם בה שאתה נכנס אל ה-DMS. עמוד זה כולל את זמן הלבשה שלך עבור Eversense, דוחות Captur AGP ואת המידע אודות המערכת.

זמן לבישת Eversense

זמן הלבשה הוא אחוז הזמן בו נלבש המשדר החכם, במהלך טווח התאריכים אותו בחרת. 100% מהווים 23.5 שעות של זמן נשיאה של המשדר החכם בכל יום. האחוז אינו כולל זמנים בהם ערך הסוכר איננו מוצג. לדוגמה: ההתחלה של שלב האתחול או כאשר מופעלת התרעה המונעת את הצגת נתוני הסוכר.

ⓘ Eversense Wear Time
21.3 %

מידע אודות המערכת: חלק ה-'מידע אודות המערכת' ממוקם בחלק התחתון של תמונת המצב AGP.


חלק זה מראה לך את:

- המספר הסידורי של המשדר
- המספר הסידורי של החיישן
- הגדרות סוכר: את הגדרות הסוכר ניתן לשנות דרך ה-DMS וגם באמצעות אפליקציית Eversense הניידת (ראה *Settings* (הגדרות) למידע נוסף).

System Information	Glucose Settings		
Transmitter: 35248	Target	Low: 79 mg/dL	High: 140 mg/dL
Sensor: 262344	Alert	Low: 70 mg/dL	High: 200 mg/dL

Eversense DMS Captur AGP כחלק מ-

הדוח הראשוני של תמונת המצב Eversense DMS הוא דוח ה-Captur AGP (פרופיל סוכר אמבולטורי).
דוח ה-AGP מציג נתוני סוכר בתוך 3 חלקים של הדיווח שלהם.

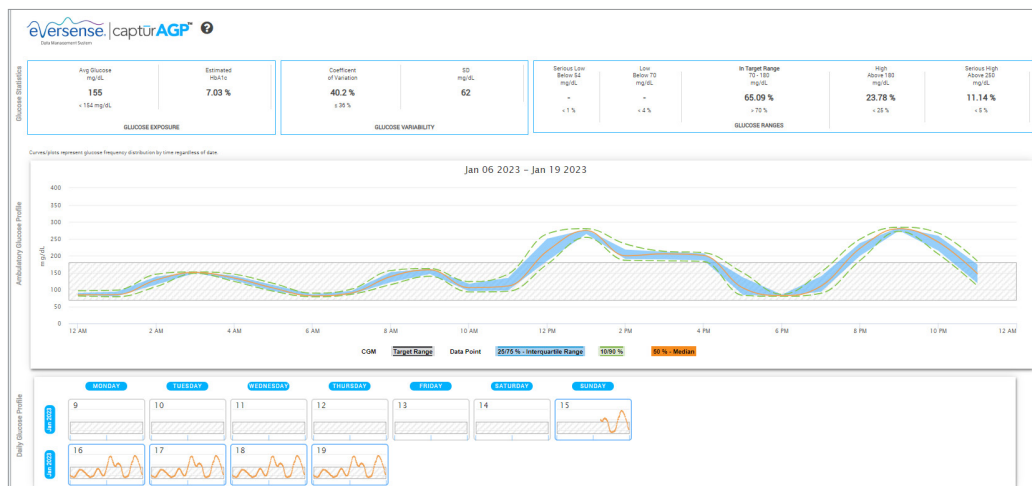

סטטיסטיקות סוכר: מידות אודות נתוני הסוכר שלך

- ממוצע סוכר (ממוצע): כל ערכי הסוכר ביחד, מחולקים למספר הקריאות
- HbA1c משוער: מחושב מתוך ערכי הסוכר AGP; יכול להיות שונה מ-A1c במעבדה בגלל תקופות זמן שונות
- טווחי סוכר: באופן אידאלי, ערכי הסוכר נמצאים בטווח המטרה
 - נמוכים/מאוד נמוכים: מטרה – ללא ערכים נמוכים או מאוד נמוכים; הפחתה של נמוכים תגרום לך להרגיש טוב יותר
 - גבוהים/מאוד גבוהים: מטרה – ללא ערכים גבוהים או גבוהים מאוד; הפחתה של הגבוהים תגרום ל-A1c לרדת במהלך הזמן
- SD (סטיית תקן): כמה שינויים קיימים בסט הנתונים שלך; באופן אידאלי, מספר נמוך
- CV (מקדם של שינוי): עד כמה רחוקים הערכים מן הממוצע; באופן אידאלי, מספר נמוך


Glucose Statistics	Avg Glucose mg/dL		Estimated HbA1c		Coefficient of Variation		SD mg/dL		Serious Low Below 54 mg/dL		Low Below 70 mg/dL		In Target Range 70 - 180 mg/dL		High Above 180 mg/dL		Serious High Above 250 mg/dL	
	155		7.03 %		40.33 %		63		-		-		64.91 %		23.84 %		11.24 %	
	< 154 mg/dL				≤ 36 %				< 1 %		< 4 %		> 70 %		< 25 %		< 5 %	
	GLUCOSE EXPOSURE				GLUCOSE VARIABILITY				GLUCOSE RANGES									

פרופיל סוכר: פרופילים יומיים של סוכר משולבים בכדי להציע תמונה של יום אחד (24 שעות). באופן אידאלי, הקווים נשארים בתוך האזור האפור המוצל (טווח המטרה). יכול להיות שהקווים לא יהיו מלאים, בגלל שיכול להיות שלא תיבדק בכל שעה של היום.


כתום: קו תיכוני (אמצעי) היכן שחצי מערכי הסוכר נמצאים מעל וחצי נמצאים מתחת; באופן אידאלי, הקו הכתום הוא בעיקר שטוח ונמצא בתוך האזור האפור המוצל

כחול: האזור בין הקווים הכחולים מראה 50% מערכי הסוכר; באופן אידאלי, השטח ביניהם הוא צר

ירוק: 10% מן הערכים הם מעל (90% קו עליון) ו-10% הם מתחת (10% קו תחתון); באופן אידאלי, ככל שהקווים הירוקים קרובים יותר אל האזור האפור המוצל, כך טוב יותר

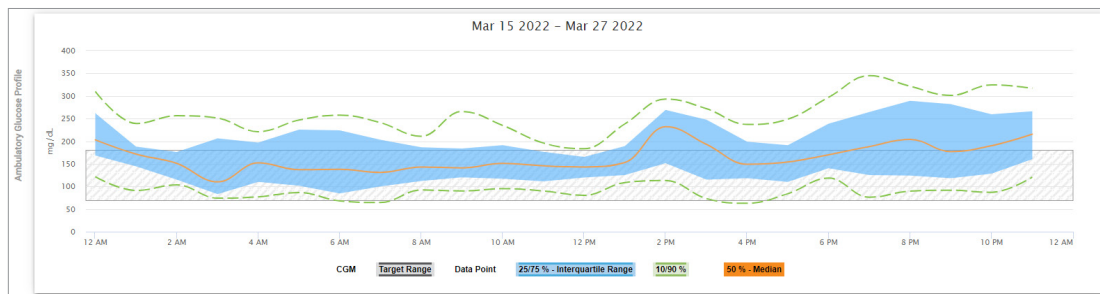

פרופילי סוכר יומיים: כל תיבה מייצגת תבנית סוכר של יממה אחת. הם יוצגו רק אם טווח התאריכים שלך נקבע ל-14 ימים או פחות.

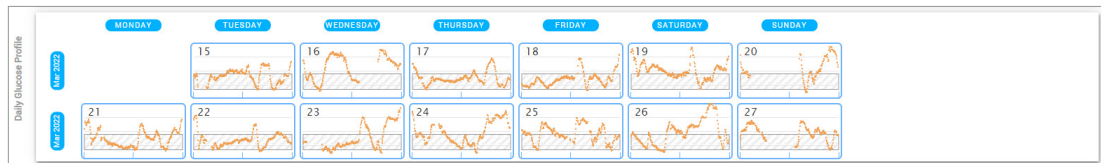

3. Reports (דוחות)

3




תכונת מפתח של אפליקציית Eversense DMS היא היכולת ליצור, להדפיס ולשתף דוחות מפורטים אודות היסטוריית הסוכר שלך. הדוחות מספקים דרכים מגוונות לארגן ולראות את קריאות הסוכר שלך מדקה לדקה, יום ליום, או במהלך טווח של כמה שבועות או חודשים.




הערה: אם אתה בוחר בדוח מסוים ואין נתונים אשר מוצגים, בדוק שנתוני הסוכר הועלו קודם לכן עבור טווח התאריכים הנבחר. אם עדיין לא מוצגים, צור קשר עם מחלקת שירות לקוחות.

סנן, הדפס או שלח בדוא"ל את הדברים המוצגים בדוחות

בפינה הימנית העליונה של עמודי הדוח יישן אפשרויות עבור שינוי של העדפות הדוח, הדפסה של הדוח ושליחה שלו בדוא"ל.

Last 7 DaysLast 14 DaysLast 30 DaysLast 60 DaysLast 90 DaysCustom Range



			הקש על מנת
שמור דוח כ-PDF	שלח דוח בדוא"ל	שנה מסנני דוח	איך
לחץ על הסמל על מנת להפוך את הדוח שלך לקובץ PDF המאפשר לך להדפיס את הדוח בבית.	עקוב אחר החלון המוקפץ המבקש ממך לשלוח דוח הניתן להדפסה לנמען נבחר. <div><div>Send Report to Email</div><div>To: <div></div></div><div>Subject: Glucose Variability for Jean Garcia from 01/13/2022 to 04/12/2022</div><div>Attached: GlucoseVariability.pdf</div><div>Message: Glucose Variability for Jean Garcia from 01/13/2022 to 04/12/2022</div><div>Send</div></div>	בצע בחירות על מנת לבחור אילו סוגי אירועים, ימים של השבוע ואפשרויות אחרות תופענה בדוחות, כאשר ישימות. מסנן זה איננו זמין עבור דוחות ה-AGP, זמן בתוך הטווח על פי זמן היום, או זמן בתוך היעד. <div><div>Report Preferences</div><div>Report TypesDays of the Week</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Sensor Glucose <input type="checkbox"/> Blood Glucose <input type="checkbox"/> Insulin <input type="checkbox"/> Meal <input type="checkbox"/> Exercise <input type="checkbox"/> Health</div><div>CancelSave</div></div>	


זמן בתוך היעד

דוח ה-'זמן בתוך היעד' מציג גרף עוגה המנתח את אחוז הזמן בו נתוני הסוכר שלך נמצאים מתחת, בתוך או מעל טווח היעד אותו קבעת בגדרות הסוכר שלך.

3

הצגת הדוח:

הטריז הירוק מייצג את אחוז הזמן בו היית בתוך טווח המטרה שלך.
הטריז האפור מייצג את אחוז הזמן בו היית מעל טווח המטרה שלך.
הטריז האדום מייצג את אחוז הזמן בו היית מתחת טווח המטרה שלך.

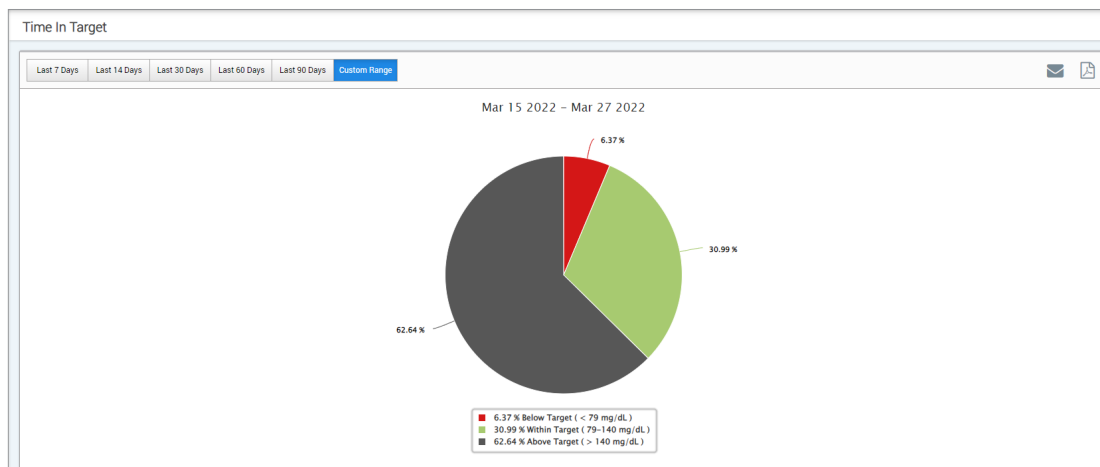

זמן בתוך הטווח

זמן בתוך הטווח על פי זמן היום


דוח ה-'זמן בתוך הטווח על פי זמן היום' מראה סט של גרפי עמודות הבוחנות את אחוז הזמן בו הסוכר שלך היה בתוך טווחי הסוכר אשר נקבעו מראש.


- מאוד נמוך: > 54 מ"ג/ד"ל
- נמוך: $54 - 70$ מ"ג/ד"ל
- בתוך הטווח: $70 - 180$ מ"ג/ד"ל
- גבוה: $180 - 250$ מ"ג/ד"ל
- מאוד גבוה: < 250 מ"ג/ד"ל

לדוח זה יש שני חלקים:

זמן בתוך הטווח

חלק זה מציג את אחוז הזמן הכולל שלך בו הסוכר שלך היה בתוך טווחי הסוכר אשר נקבעו מראש, על בסיס טווח התאריכים אותו בחרת.

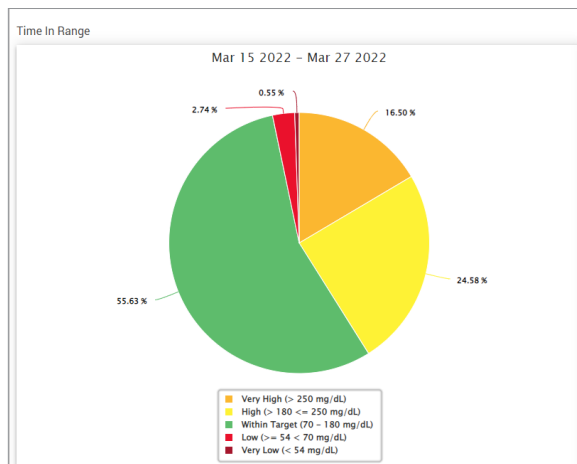

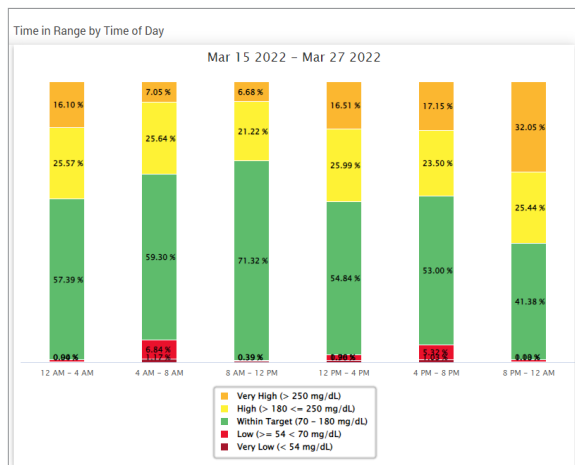

זמן בתוך הטווח על פי זמן היום

חלק זה של הדוח מציג את תרשים 'זמן בתוך הטווח' הכללי אל חלקים שונים במהלך היום. אתה יכול לראות את הנתונים שלך בחלקים של 4 שעות, 6 שעות או 8 שעות. ניתן לבצע התאמה זו על ידי בחירה בחלק הימני העליון של הדוח.

כל חלק מראה את אחוז הזמן בו ערכי הסוכר שלך היו בתוך אותם חלקים של מאוד נמוך, נמוך, בתוך הטווח, גבוה ומאוד גבוה.



דוח נטיית השינוי של הסוכר

דוח נטיית השינוי של הסוכר מציג מידע בשתי דרכים שונות:

גרף מגמת הסוכר:

- מציג סיכומי קריאות סוכר לפרק זמן של 24 שעות.
- כולל מספר רב של ימים המופיעים על גבי אותו הגרף.
- מראה את קריאת הסוכר המקסימלית, המינימלית והממוצעת עבור כל שעה.
- מספק תמונות חזותיות של שינויים ברמות הסוכר היומיות שלך.

הערה: הנח את הסמן שלך מעל לקריאת סוכר חיישן ממוצעת מסוימת על מנת לראות פרטים על הקריאות במהלך אותה השעה.

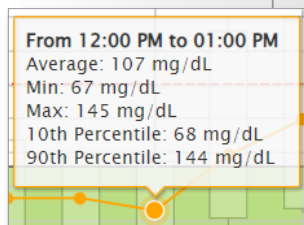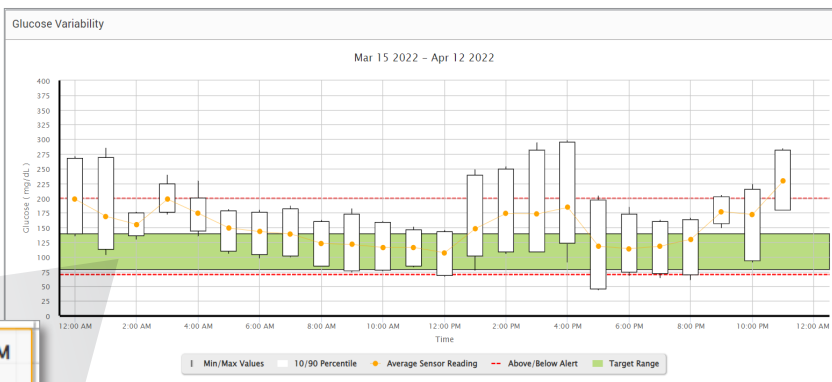

Glucose							
GLUCOSE	00:00-04:00	04:00-08:00	08:00-12:00	12:00-16:00	16:00-20:00	20:00-00:00	TOTAL
% Below Low Alert	-	-	-	2 %	12 %	2 %	2 %
% Above High Alert	31 %	2 %	-	19 %	9 %	23 %	14 %
Number of Values Below Low Alert	-	-	-	3	12	2	17
Number of Values Above High Alert	29	2	-	18	9	19	77
% Within Target	20 %	40 %	51 %	45 %	30 %	13 %	33 %
% Below Target	-	-	8 %	9 %	20 %	6 %	7 %
% Above Target	80 %	60 %	41 %	46 %	50 %	81 %	59 %
Average Glucose	180 mg/dL	150 mg/dL	119 mg/dL	150 mg/dL	133 mg/dL	169 mg/dL	150 mg/dL
Lowest Glucose	103 mg/dL	97 mg/dL	73 mg/dL	67 mg/dL	44 mg/dL	61 mg/dL	44 mg/dL
Highest Glucose	285 mg/dL	229 mg/dL	182 mg/dL	294 mg/dL	298 mg/dL	284 mg/dL	298 mg/dL
Standard Deviation	46.2 mg/dL	31.2 mg/dL	33.1 mg/dL	55.3 mg/dL	59.5 mg/dL	46 mg/dL	50.9 mg/dL
Number of Values in the 10-90 Percentile	79	74	80	75	78	68	446
Total Number of Glucose Values	95	91	95	93	96	84	554
Number of Days with at least One Value	2	2	2	2	2	2	2
Average Number of values per Day	48	46	48	46	48	42	277

הטבלה:

- מארגנת נתוני סוכר על פי מרווחים של 4 שעות.
- מספקת ניתוח סטטיסטי מפורט עבור כל מרווח זמן.
- כוללת אחוזי קריאות הנמצאות בתוך, מעל ומתחת לטווח יעד הסוכר.
- מספקת מיון של שימוש באינסולין ופחמימות אשר הוזנו עבור אותם מרווחי זמן.

הערה: אם יש לך בעיות בהצגת הדוח, נסה להגביל את טווח התאריכים שלך. בדרך כלל כמות גדולת של נתונים לא תאפשרנה את תפקודו של הדוח.

הרצת הדוח

1. בחר > Reports > Glucose Variability (דוחות < נטיית השינוי של הסוכר)

טווח התאריכים המוצג יהיה השבוע האחרון בו הוזנו או הועלו נתונים.

2. בחר את טווח התאריכים

הערה: על מנת לשנות את טווח התאריכים עבור הדוח, עקוב אחר הוראות *Setting Date Range* (קביעת טווח תאריכים) שניתנו קודם בחלק *Dashboard* (תמונת מצב) במדריך זה למשתמש.

דוח מגמת הסוכר

דוח מגמת הסוכר:

- מציג קריאות סוכר פרטניות לפרק זמן של 24 שעות.
- מציג מספר רב של ימים המופיעים על גבי אותו הגרף.
- מספק דרך קלה לזהות את נטיית השינוי במהלך ימות השבוע.

הרצת הדוח


1. בחר Reports > Glucose Trend (דוחות < מגמת סוכר)

2. בחר את טווח התאריכים

הצגת הדוח

נקודות נתונים על גבי הדוח מקודדות צבעים כאשר כל יום בשבוע מוצג בצבע אחר. אתה יכול להשתמש במסנני הדוח על מנת לבחור את היום/ימים אותם תרצה להציג על הגרף.

3

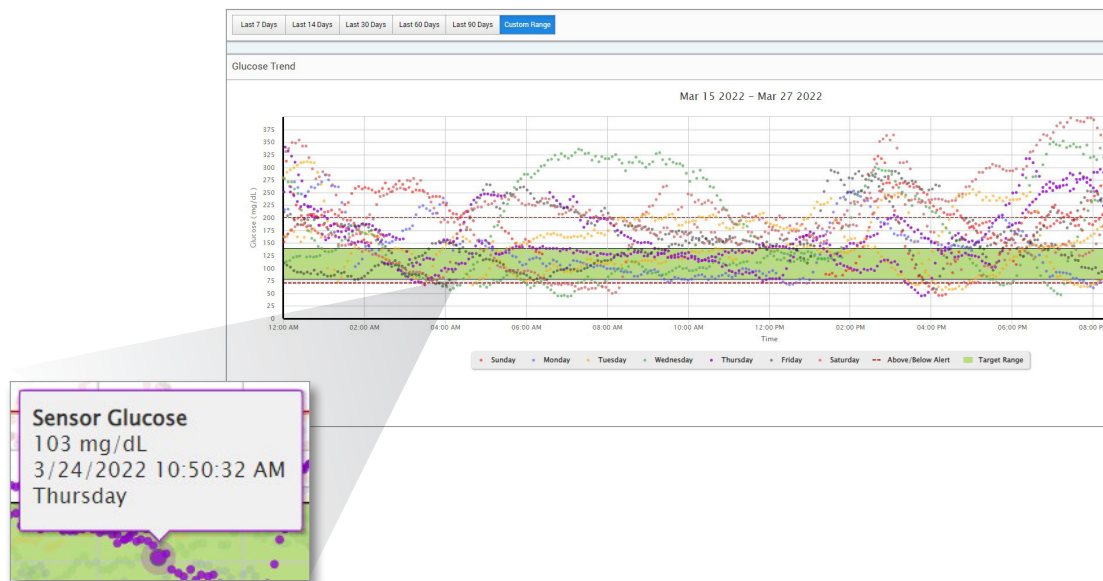

הערה: הנח את הסמן שלך מעל לקריאת סוכר חיישן מסוימת על מנת לראות פרטים על אותה הקריאה.

דוח היסטוריית הסוכר

דוח היסטוריית הסוכר מציג CGM היסטוריים ונתונים אשר הוזנו באופן ידני בצורה של גרף מגמה. דוח היסטוריית הסוכר מספק דרך יעילה לעקוב אחר קריאות סוכר החיישן ואחר הכיולים.

הרצת הדוח


1. בחר **Reports > Glucose History Report** (דוחות < דוח היסטוריית הסוכר)

2. בחר את טווח התאריכים

הצגת הדוח

כל נקודת נתונים מהווה קריאת סוכר חיישן בודדת. האירועים שתועדו באפליקציה הניידת מוצגים בדוח בזמן שבו הם תועדו. אם תבחר טווח נתונים של יותר מ-30 ימים, אירועים כגון ארוחות, אינסולין וכו', לא יוצגו.

3

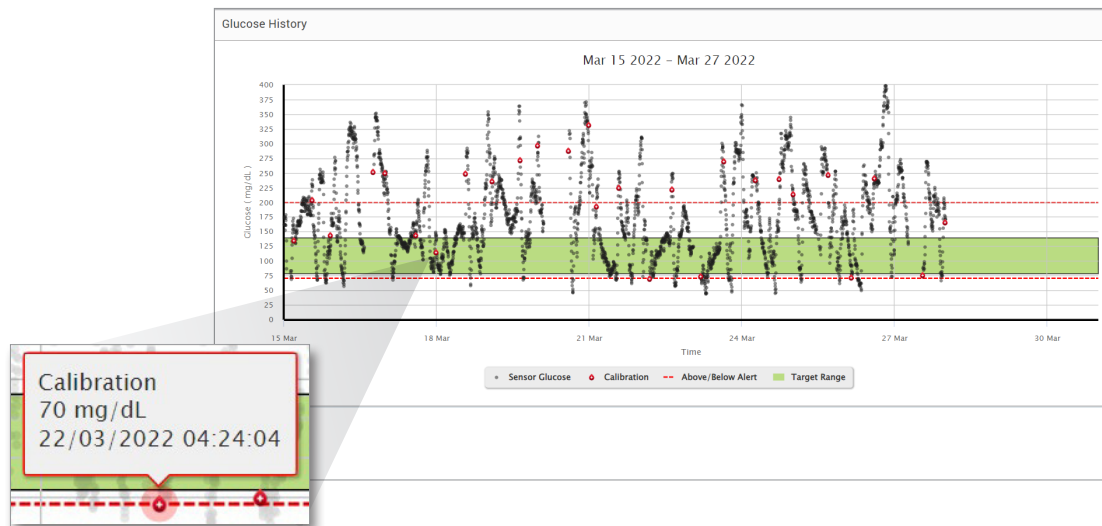

הערה: הנח את הסמן שלך מעל לקריאת סוכר חיישן מסוימת על מנת לראות פרטים על אותה הקריאה. אתה יכול גם להניח את הסמן מעל לסמל אירוע על מנת לראות פרטים לגבי אותו האירוע.

דוח סוכר יומי

דוח הסוכר היומי מציג קריאות סוכר לאורך תקופה של 24 שעות, מספר ימים ברצף.

דוח הסוכר היומי:

- בעל טווח סוכר מטרה קבוע של 70-180 מ"ג/ד"ל.
- מראה התרעות סוכר נמוך וגבוה (קווים אדומים) אותן קבעת במערכת ה-CGM שלך.
- מראה סטטיסטיקות מרכזיות עבור כל יום על בסיס סוכר מטרה והגדרות התרעות.
- מכיל אופציה לתצוגה של אייקוני אירועים על גבי גרף המגמה והרחבה לטבלה של אירועים עבור כל יום.

הרצת הדוח

1. בחר **Reports > Daily Glucose Reports** (דוחות < דוחות סוכר יומיים)

2. בחר את טווח התאריכים

הצגת הדוח

דוח הסוכר היומי מציג מספר ימים ברצף עבור טווח התאריכים שנבחר ומספק דרך לזיהוי תבניות של סוכר לאורך כמה ימים. סטטיסטיקות עבור כל יום מופיעות מצידו הימני של גרף המגמה והן מבוססות על טווח סוכר המגמה הסטנדרטי של 70-180 מ"ג/ד"ל ועל רמות הסוכר הגבוה והנמוך אשר נקבעו על ידך. על מנת לעיין במידע CGM נוסף עבור כל יום (התרעות, כיוולים, אירועים אותם הזנת אל אפליקציית ה-CGM), אתה יכול להפעיל את תצוגת אייקוני האירועים על גבי גרף המגמה ולהרחיב את טבלת האירועים מתחת לגרף המגמה על מנת להציג מידע נוסף. כאשר הרחבה זו קיימת, טבלת האירועים מציגה מידע בטווחים של 4 שעות המיושרים עם טווחים של 4 שעות בגרף המגמה.



הערה: כאשר מספר רב של אירועים נרשמים בתא בודד של טבלת האירועים, רחיפה מעל התא תציג מידע נוסף.



דוח התפלגות הסוכר

דוח התפלגות הסוכר:

- מארגן את נתוני הסוכר שלך בהתאם ליעדי הסוכר שלך ולטווחי ההתרעות ומציג את הנתונים בצורה של גרף עוגה.
- מציג גרפי עוגה נפרדים עבור התקופה הנוכחית ועבור תקופות קודמות.
- טווח היעד מוגדרים תחת הגדרות הסוכר.
- מספק בדיקה חזותית עבור מספר הקריאות שהיו בטווח היעד במהלך טווח שנבחר מראש ואת השינוי לאורך הזמן.

הרצת הדוח


1. בחר **Reports > Glucose Distribution Report** (דוחות < דוח התפלגות הסוכר)

2. בחר את טווח התאריכים

הצגת הדוח

דוח התפלגות הסוכר יציג שני גרפי עוגה על בסיס טווח התאריכים אותו תבחר מראש. הוא יראה את הנתונים הנוכחיים והנתונים הקודמים עבור טווח התאריכים הנבחר. נתונים אלו מאפשרים לך לבצע השוואה של שינויי הווה ועבר כחלק מן הניהול שלך.

3

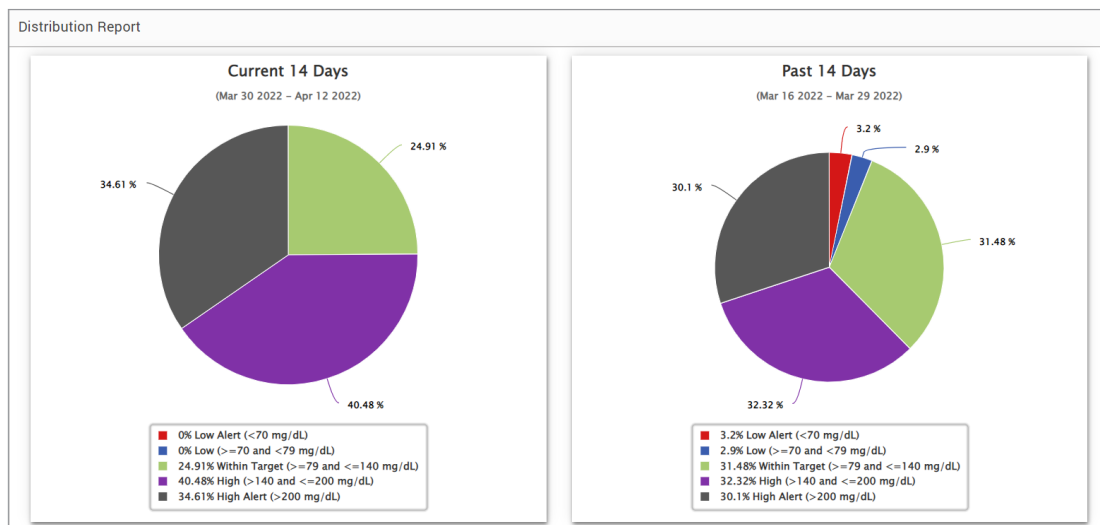

דוח יומן משדר

דוח יומן המשדר מספר סקירה מקיפה של הנתונים בתוך טווח התאריכים הנבחר.

דוח יומן המשדר מציג שלוש טבלאות נפרדות:

- **Blood Glucose** (סוכר בדם): טבלה זו מציגה רשימה של כל קריאות הסוכר בדם שהוזנו ידנית ואירועים קשורים בסדר כרונולוגי.
- **Event Entries** (הזנות אירועים): טבלה זו מציגה אירועי מטופל אשר הוזנו באמצעות אפליקציית Eversense הניידת.
- **Sensor Glucose** (סוכר חיישן): טבלה זו מציגה ערכי סוכר אשר נקראו על ידי החיישן.

הרצת הדוח

1. בחר **Reports > Transmitter Log** (דוחות > יומן משדר)

2. בחר את טווח התאריכים

הצגת הדוח

האירועים מוצגים עם מידע בנוגע לתאריך, השעה ו-:

- **Blood Glucose** (סוכר בדם): ערך סוכר, יחידה, כיוול
- **Event Entries** (הזנות אירועים): סוג האירוע, תת סוג האירוע, ערך
- **Sensor Glucose** (סוכר חיישן): ערך סוכר, יחידה, מזהה חיישן

ניתן למיין את האירועים בסדר עולה או בסדר יורד על ידי לחיצה על ראש העמודה. מספר הרשומות מצוין בסופו של כל יומן.

Blood Glucose				
<div> <input type="text" value="Search"/> </div> <div> Manual Used Not Used </div> <div>Export Data</div>				
DATE	TIME	BLOOD GLUCOSE	UNIT	CALIBRATION
01-April-2022	23:44	252	mg/dL	
01-April-2022	13:25	223	mg/dL	
01-April-2022	02:24	344	mg/dL	
01-April-2022	01:03	402	mg/dL	
31-March-2022	10:22	103	mg/dL	
30-March-2022	23:31	187	mg/dL	
30-March-2022	14:17	135	mg/dL	
30-March-2022	00:58	153	mg/dL	
<div>8 total</div> <div> « « 1 » » </div>				

סמל מתחת לעמודה "Calibration" (כיוול) בטבלת ה-'סוכר בדם' יציין האם ערך הסוכר שימש לכיוול, לא שימש, או היה ידני.

- Used** (שימש): ערך סוכר בדם אשר אותו הזנת כערך כיוול והוא התקבל על ידי המערכת.
- Not used** (לא שימש): ערך כיוול אותו הזנת הנמצא מעל ל-400 מ"ג/ד"ל או מתחת ל-40 מ"ג/ד"ל.
- Manual** (ידני): אירוע סוכר בדם אשר לא הוזן כערך כיוול.


בחירה של "Device History" (היסטוריית מכשיר) תראה מתי החיישן הוחדר, כמו גם את תאריך תחילת הכיול.

ייצוא של נתונים

מעמוד 'דוח יומן המסדר', אתה יכול גם לייצא נתונים בפורמט .xlsx.

1. בחר Reports > Transmitter Log (דוחות < יומן מסדר)

2. בחר "Export all" (ייצא הכל) בחלק העליון של העמוד על מנת לייצא את כל נתוני יומן המסדר כ-.xlsx (גיליון Excel)

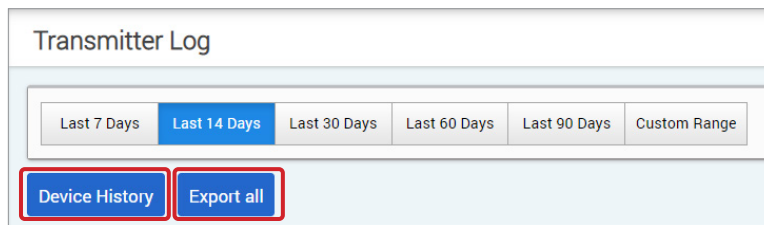

4. Settings (הגדרות)

סוכר

הגדרות הסוכר מאפשרות לך להתאים אישית את רמות היעד וההתרעה עבור הסוכר שלך. הגדרות אלו משפיעות על הצורה בה הסוכר ונתוני אירועים אחרים מאורגנים ומוצגים בדוחות. כאשר אתה מסנכרן באופן אלחוטי את הנתונים שלך באמצעות תכונת 'שתף את הנתונים שלי' באפליקציה הניידת, הגדרות הסוכר אותן שמרת באפליקציה תסונכרנה גם הן אל חשבון ה-DMS שלך.

הערה:

- לא יתבצע סנכרון של הגדרות הסוכר כאשר הנתונים מועלים מן המשדר החכם באמצעות כבל ה-USB עם אפליקציית הלקוח של Eversense.
- שינוי ההגדרות בתוך ה-DMS לא ישנה את ההגדרות אותן הזנת באפליקציית Eversense הניידת. אתה יכול לשנות את ההגדרות עבור מערכת ה-Eversense CGM שלך היישר על גבי אפליקציית Eversense CGM הניידת.

Glucose Settings

Unit Of Measure ☒ mg/dL ☐ mmol/L

Target Range (must be between Alert Settings)

High Target *

-

140

+

Low Target*

-

79

+

Alert Range (must be between 60 and 350)

High Alert*

-

200

+

Low Alert *

-

70

+

Cancel

Save

Eversense CGM מדריך למשתמש 40

LBL-4206-43-001 Rev D_Eversense_DMS_User_Guide_mgdl_R3_HE.indd 40

17/08/2023 5:49 AM

על מנת לשנות את ההגדרות בתוך חשבון ה-Eversense DMS שלך, יש לבצע את השלבים הבאים:

1. בחר **Glucose > Settings** (הגדרות < סוכר)

2. הקש על לחצן מ"ג/ד"ל או ממו"ל/ל' מתחת ל-'יחידות המידה' על מנת לבחור את יחידת המידה בה אתה רוצה שנתוני הסוכר יוצגו.

אם אתה משנה את יחידת המידה, ערכי טווח הסוכר וערכי טווח ההתרעות ישתנו בהתאם.

3. הקש על לחצני +/- בצד הימני של ה-'יעד הגבוה' וה-'יעד הנמוך' על מנת להציג ולשנות את הגבול הגבוה והגבול הנמוך של טווח היעד של הסוכר שלך.

4. חזור על שלב זה עבור טווח ההתרעה של הסוכר

5. כאשר סיימת לבצע את השינויים, הקש על "Save" (שמור) על מנת לשמור את השינויים שלך

הערה: הגדרות Eversense DMS לא תשפיענה על הגדרות מערכת ה-Eversense CGM והן תשפיענה רק על האופן בו הנתונים מאורגנים ומוצגים בתצוגת Eversense DMS.

דוח סיכום

הגדרות דוח סיכום מאפשרות לך לקבוע דוח אוטומטי מתוכנן באופן סדיר אשר יישלח אליך בדוא"ל. אתה יכול לבחור את הדרך בה תקבל את הדוחות ואלו דוחות תרצה לקבל.

הערה:

- אתה תקבל את הדוחות כקובצי PDF מצורפים אל הודעת דוא"ל.
- כתובת הדוא"ל אליה תקבל את הדוחות היא כתובת הדוא"ל בה עשית שימוש ליצור את חשבון Eversense שלך.

4

על מנת לשנות את ההגדרות בתוך חשבון ה-Eversense DMS שלך, יש לבצע את השלבים הבאים:

1. בחר **Settings > Report Summary** (הגדרות > דוח סיכום)
2. לחץ על התיבה ליד **"Yes, I would like to receive reports"** ("כן, אני רוצה לקבל דוחות") כך שניתן יהיה לראות את הסימון
3. בחר באיזו תדירות תרצה לקבל את הדוחות אל כתובת הדוא"ל שלך
 - **Once a week** (פעם בשבוע): אתה תקבל את הדוח בכל יום ראשון. הדוחות יציגו את הנתונים אותם מערכת ה-Eversense CGM שלך חישה בשבוע הקודם.
 - **Every Other Week** (פעם בשבועיים): אתה תקבל את הדוח ביום ראשון פעם בשבועיים. הדוחות יציגו את הנתונים אותם מערכת ה-Eversense CGM שלך חישה בשבועיים הקודמים.

• **Once a Month** (פעם בחודש): אתה תקבל את הדוח ביום הראשון בכל חודש. הדוחות יציגו את הנתונים אותם מערכת ה-Eversense CGM שלך חישבה בחודש הקודם.

4. בחר את השפה בה תרצה שהדוחות יוצגו

5. בחר אלו דוחות תרצה לקבל

הערה:

- הדוחות יישלחו כצרופת PDF בהודעת הדוא"ל אותה תקבל.
- אם תבחר את דוח הזמן בתוך המטרה, אתה תהיה חייב גם לבחור את הגדרת השעה ביום. למידע נוסף אודות דוח זמן בתוך הטווח על פי זמן היום, ראה *Reports (דוחות)*.

6. לחץ על "Save" (שמור)

לאחר שההגדרה נשמרה, אתה תקבל את הודעת הדוא"ל הראשונה שלך ביום הראשון של המחזור הבא. אם תבחר בפעם בשבוע או פעם בשבועיים, אתה תקבל את הדוח הראשון שלך ביום ראשון העוקב לך. אם תבחר בפעם בחודש, אתה תקבל את הדוח הראשון שלך ביום הראשון של החודש הבא.

על מנת להפסיק לקבל דוח סיכום בהודעות דוא"ל:

1. בחר Settings > Report Summary (הגדרות > דוח סיכום)

2. לחץ על התיבה ליד "Yes, I would like to receive reports" ("כן, אני רוצה לקבל דוחות") כך שלא יהיה סימון בתוך התיבה

3. לחץ על "Save" (שמור) בחלק התחתון של העמוד

הערה: אם לא ביצעת סנכרון של הנתונים שלך אל חשבון ה-Eversense שלך מתוך מערכת ה-Eversense CGM שלך במהלך תקופת דוח אחת, אתה תקבל הודעת דוא"ל האומרת לך שלא תקבל יותר הודעות דוא"ל עד אשר לא תבצע את סנכרון הנתונים אל החשבון שלך.

5. Transmitter (משדר)

העלה נתוני מכשיר

ניתן להעלות את נתוני ה-CGM שלך אל חשבון ה-DMS שלך באופן אלחוטי או על ידי שימוש בכבל ה-USB אשר סופק לך ביחד עם מערכת ה-Eversense CGM שלך:

5



1. אם פונקציית Auto Sync (סנכרון אוטומטי) מופעלת באפליקציית Eversense הניידת שלך, נתוני ה-CGM שלך יועלו באופן אוטומטי אל חשבון ה-DMS שלך בכל 5 דקות.

עצה: חיבור אלחוטי לאינטרנט מן המכשיר הנייד שלך נחוץ על מנת לסנכרן את הנתונים שלך באמצעות אפליקציית Eversense הניידת.

הערה: אתה יכול להעלות את הנתונים באופן ידני על ידי שימוש בתכונת 'שתף את הנתונים שלי' באפליקציית Eversense הניידת ועל ידי לחיצה על 'התחל סנכרון' על מנת להעלות באופן אלחוטי את נתוני ה-CGM שלך אל חשבון ה-DMS שלך.

2. אתה יכול גם להעלות נתונים מן המשדר החכם דרך כבל USB הניתן ביחד עם מערכת ה-Eversense CGM שלך. על מנת להעלות את נתוני המשדר החכם באמצעות כבל USB, עליך להוריד ולהתקין תחילה את אפליקציית הלקוח של Eversense.

הערה: במהלך תהליך ההעלאה, המשדר החכם שלך לא יאסוף נתונים מן החיישן.

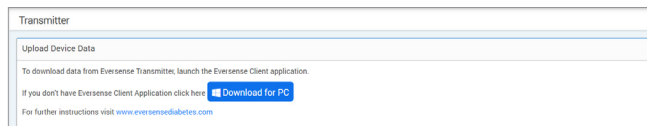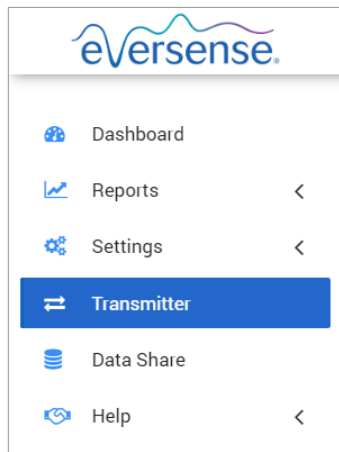

על מנת להוריד ולהתקין את אפליקציית הלקוח של Eversense:

1. בחר Transmitter (מסדר) ותפריט הגלישה

2. לחץ על Download for PC (הורדה עבור מחשב) או Download for Mac (הורדה עבור Mac)

הלחצן המתאים יוצג בהתאם למערכת המחשב בה אתה עושה שימוש.

הערה: לאחר הורדה מוצלחת, אתה עלול לראות אזהרה מן הדפדפן שלך האומרת שהתקנת התכנה איננה מורדת בדרך כלל ושהיא עלולה להיות מסוכנת. Eversense DMS אינה מכילה תכנות זדוניות או וירוסים אשר עלולים להזיק למחשב שלך.

5


על מנת להוריד את אפליקציית הלקוח של Eversense עבור משתמשי מחשב

1. הרץ את תכנת ההתקנה

אתה יכול גם להקיש על "Save" (שמור) על מנת לשמור את התכנה במחשב שלך ולהתקין אותה במועד מאוחר יותר. כאשר אתה מריץ את התכנה, עקוב אחר החלונות המוקפצים המגיעים מאשף InstallShield.

5

עבור משתמשי Chrome:

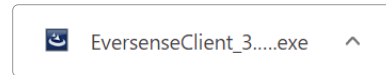


עבור משתמשי Internet Explorer ומשתמשי דפדפנים אחרים:




הערה: אפליקציית הלקוח של Eversense מורדת היישר מתוך Eversense DMS. יכול להיות שיופיע חלון קופץ אשר ישאל אותך אם תרצה להתקין אפליקציה זו בגלל שהיא איננה מורדת מחנות Microsoft. אנא לחץ על "Run Anyway" (הרץ בכל מקרה) בכדי להמשיך את ההתקנה.


2. הקישו דרך אפשרויות ברירת המחדל על מנת להתקין את התכנה

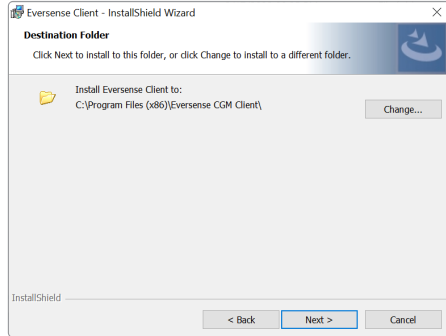


א.

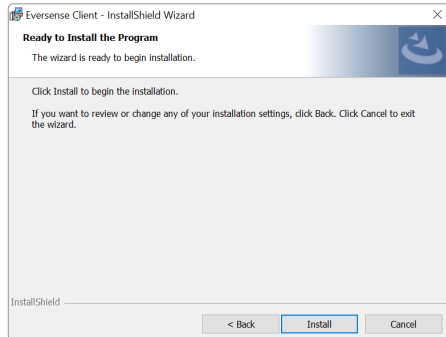

ד.

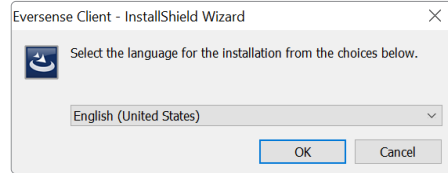


א.

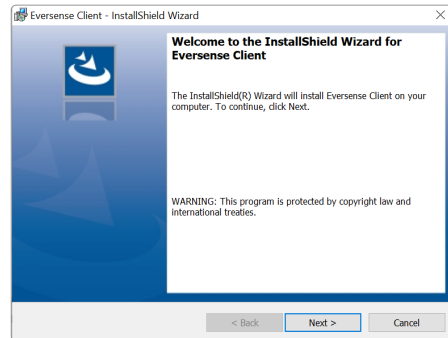

ב.

5

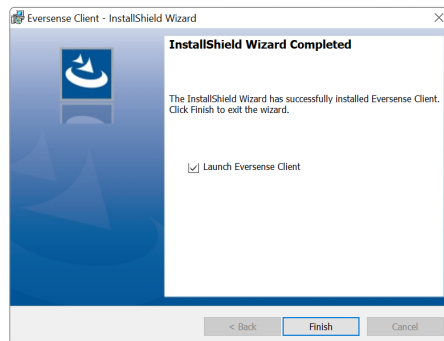


על מנת להוריד את אפליקציית הלקוח של Eversense עבור משתמשי Mac:



1. הרץ את תכנת ההתקנה

2. גרור ושחרר את אייקון לקוח Eversense אל תיקיית האפליקציה על גבי המסך

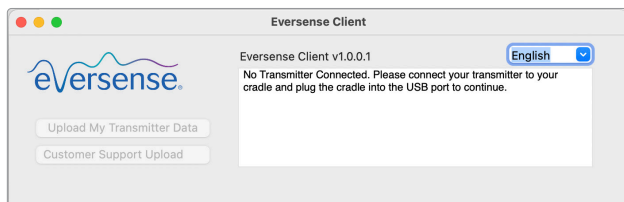

3. פתח את אפליקציית הלקוח של

Eversense בתוך תיקיית האפליקציות של ה-Mac שלך.

חשוב: אפליקציית הלקוח של Eversense מורדת היישר מתוך Eversense DMS. כאשר תרצה לפתוח את האפליקציה, יכול להיות שיופיע חלון קופץ שאומר ש-APPLE איננה יכולה לפתוח אפליקציה זו. אפליקציית הלקוח של EVERSENSE איננה מכילה תוכנות זדוניות.

על מנת לפתוח את האפליקציה, עליך:

1. לעבור אל System Preferences > Security and Privacy (העדפות מערכת > ביטחון ופרטיות)

2. ללחוץ על "Open Anyway" (פתח בכל מקרה) ליד "Eversense Client was blocked from use" (אפליקציית הלקוחות Eversense נחסמה בגלל שהיא איננה מגיעה ממפתח מוכר)

3. ללחוץ על "Open" (פתח) בחלון הקופץ הבא


על מנת להעלות את נתוני המסדר החכם אל חשבון ה-DMS שלך:




1. פתח את אפליקציית הלקוח של Eversense על ידי פתיחה של Start menu > All Programs (תפריט התחלה < כל התכניות) פתח את תיקיית Eversense < פתח את תיקיית Eversense Client (לקוח Eversense) < לחץ על הסמל

2. הקש על "Upload My Transmitter" (העלה את נתוני המסדר החכם שלי) ולאחר מכן הזן את כתובת הדוא"ל בה השתמשת על מנת ליצור את החשבון ואת הססמה



חבר את המסדר החכם שלך אל המחשב שלך באמצעות כבל ה-USB.

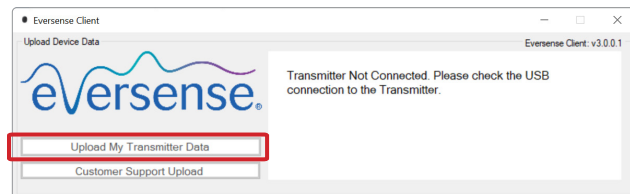


עצה: על מנת שמשמשי המחשב יפתחו את התכנה במהירות על ידי שימוש במערכות הפעלה של Windows, לחץ לחיצה ימנית על Eversense Client icon (סמל לקוח Eversense) והצמד אותו אל ה-Taskbar (סרגל המשימות) או אל תפריט Start (התחלה).

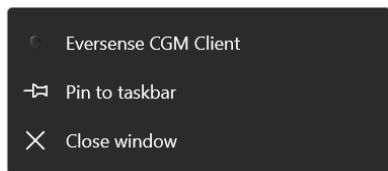


3. כאשר תתבקש לעשות זאת, הקש על "Upload" (העלה) על מנת להתחיל להעלות את נתוני המשדר החכם שלך אל החשבון שלך

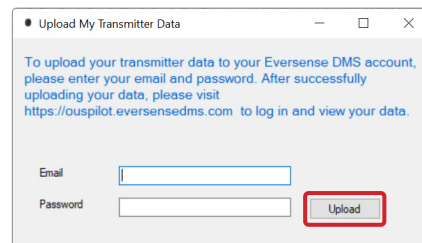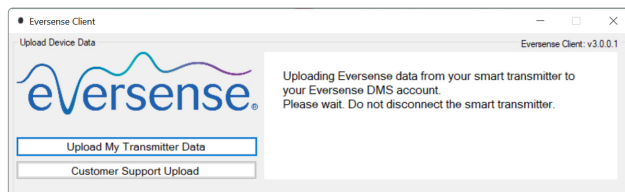

5

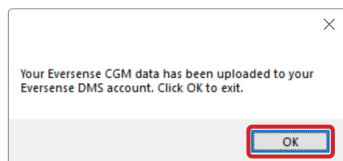

(מחשב)

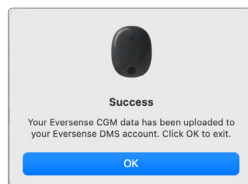

(Mac)

4. הקש על "OK" (אישור) על מנת להשלים



הערה: בעת יצירת קשר עם מחלקת שירות הלקוחות לתמיכה טכנית, אתה עלול להתבקש להעלות את יומן הניתוחים. הדבר ישמש על מנת לשלוח קובץ יומן ניתוחים מן המשדר החכם שלך אל מחלקת שירות הלקוחות. פונקציה זו תהיה בשימוש לאיתור וטיפול מתקדם בבעיות בעזרת הסיוע של מחלקת שירות הלקוחות.

6. Data Share (שיתוף נתונים)

DMS Pro

אתה יכול לחבר את חשבון Eversense DMS שלך אל חשבון Eversense DMS Pro השייך לרופא שלך על מנת לראות ולנתח את דוחות ה-DMS שלך.

הזמנה של המרפאה שלך

על מנת לחבר את חשבון Eversense DMS שלך אל חשבון Eversense DMS Pro השייך למרפאה שלך:

Share my data to clinic

Clinic # Search Provider [Share My Data](#)

CLINIC NAME	PROVIDER LAST NAME	PROVIDER FIRST NAME	STATUS	DATA SHARE	ENABLE DATA SHARE	
High Street Clinic	Johnson	Jon	Accepted	✓		

1 total

1. הקלד את מספר המרפאה Eversense DMS Pro עבור המרפאה שלך ולחץ על לחצן ENTER (הזנה) על גבי המקלדת שלך.

הערה: צור קשר עם המרפאה שלך אם אינך יודע את מספר Eversense DMS Pro עבורה.

2. בחר את הספק שלך מרשימת הספקים הנשלפת.

3. הקש על "Share My Data" (שתף את הנתונים שלי)

שם המרפאה, שם הספק, המצב והנתונים המשותפים יוצגו. המצב יציג **Pending** (ממתין) עד אשר המרפאה תקבל את ההזמנה שלך.



לאחר שהמרפאה תקבל את ההזמנה שלך, **Pending** (ממתין) ישתנה ל-**Accepted** (התקבל), וה- ישתנה ל- בעמודת שיתוף הנתונים.

הספק שלך יוכל כעת לראות את הנתונים שלך מחשבון ה-Eversense DMS Pro שלו/ה.

הזמנה מן המרפאה שלך

המרפאה שלך יכולה להזמין אותך לשתף את הנתונים שלך עם חשבון ה-Eversense DMS Pro שלה. אתה תקבל הודעת דוא"ל מן הכתובת DMS.Feedback@senseonics.com. לחץ על הקישור בהודעת הדוא"ל על מנת לשתף את הדוחות שלך. לאחר שתלחץ על הקישור, החשבון שלך יתווסף אל חשבון ה-Eversense DMS Pro של המרפאה שלך.

הסרה של המרפאה שלך

על מנת להפסיק את הגישה של מרפאה אל הנתונים שלך, הקש על  בסוף השורה שלהם. אתה יכול להסיר גישה של מרפאה אותה הזמנת אך עדיין לא בוצעה הסכמה, או של מרפאה לה כבר יש גישה לראות את הנתונים שלך. על מנת לאפשר למרפאה לראות את הנתונים שלך, עליך להקיש על  בכדי לתת להם גישה אל הנתונים שלך.

7. Help (עזרה)

אודות

עמוד זה מציג את הגרסאות העדכניות ביותר של ה-Eversense DMS ושל אפליקציית הלקוח של Eversense.

צרו אתנו קשר

פרטי קשר לתמיכה בלקוחות.

7

Contact

Contact Us

For Customer Support, please contact your local distributor. To see a list of Eversense distributors, please visit <https://global.eversensediabets.com/distributors>

חשוב: לשאלות אודות מערכת ה-Eversense CGM, צור קשר עם המפיץ המקומי שלך. צור קשר
בטלפון 844-SENSE4U (844-736-7348).

נטרל את החשבון שלי

חשוב: נטרול של חשבון ה-Eversense DMS ינטרל את החשבון שלך בכל מוצרי Eversense.

Deactivate Account

Deactivate My Account

* Mandatory field

Please submit the form below to deactivate your account.

Reason *

Password *

Secret Question What is the name of your first pet?

Answer *

7

שחרר הערות

מספק מבט כללי על העדכונים האחרונים בתכנת Eversense DMS.

הערה: כאשר ישנו עדכון זמין עבור תכנת Eversense DMS, יוצג כיתוב לרוחב החלק העליון של האתר. לחץ על הכיתוב על מנת לראות את רשימת העדכונים.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

:Basic UDI/DI
081749102FG5200T7 :Eversense DMS -

Call 04-6175390 for Customer Support.

Distributed by:


DYN Diagnostics Ltd.
7 Ha'eshel St. P.O. Box 3063
Caesarea Industrial Park 3079504,
Israel
Phone: 04-6175390
Email: patient.care@dyn.co.il

שם הרישום באמ"ר:
מערכת לניטור סוכר רציף Eversense E3
Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring System
מס' רישום: 2660816


שם היצרן וכתובתו: סנסאוניקס, אינק. סניקה מדווס
פארקווי 20451, ג'רמנטאון, מרילנד 20876-7005, ארה"ב

פרטי בעל הרישום, היבואן והמפיץ בישראל:
דין דיאגנוסטיקה בע"מ
רח' האשל 7, פארק תעשייה דרומי קיסריה, 3079504
04-6175390
patient.care@dyn.co.il

התקשר אל 04-6175390 עבור שירות לקוחות.

Emergo Europe 
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Senseonics, Inc. 
20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005 USA
global.eversenseddiabetes.com

פטנטים:

www.senseonics.com/products/patents



(241) LBL-4206-43-001_REV_D



08/2023 D גרסה LBL-4206-43-001 © Senseonics, Inc. 2023

Senseonics

Dimensions	
Trim: 6.75" w x 5.8" h	Bleed: 0.125"
Folded <i>(Include folded dimensions if applicable):</i>	

Colors: 4/color
Spot <i>(Name PMS colors if applicable):</i> N/A

Paper Weight:
Cover: 65# Gloss Cover
Text: 60# Gloss Text